

 **MEDEXIM**



МЕДЭКСИМ

Целебное действие воды и её благотворное воздействие на человеческий организм известны уже с незапамятных времен и подтверждены исторически. Использование природных термальных и минеральных источников в целях лечения и отдыха имеет длительную традицию. Вообще для оптимального применения и использования этих целебных вод самым главным в клинической практике в настоящее время является применение адекватного водолечебного оборудования. Компания «МЕДЭКСИМ» предлагает оборудование для гидротерапии на высоком качественном уровне, предназначенное для длительного и интенсивного применения в обычной и специализированной области. Оборудование изготовлено из качественного антибактерицидного акрилата, который имеет длительный срок службы, является устойчивым к истиранию и ударам, имеет превосходные теплоизоляционные и гигиенические свойства. В отличие от часто применяемого стеклоламината акрилат не изменяет цветового оттенка поверхности и не лопается при интенсивном применении. И остальные компоненты, которые применяются при сборке, удовлетворяют критериям повышенной устойчивости к агрессивной среде во влажных помещениях.


AQUADELICIA I - AQUADELICIA VIII

Ванны модельного ряда AQUADELICIA предназначены для применения в курортах, реабилитационных кабинетах, санаториях, социальных учреждениях, а также в целях велнес или спортивной реабилитации. По своей конструкции и оснащению они удовлетворяют жестким требованиям к проведению водолечебной терапии для всего тела в форме природных, термальных, минеральных, с добавками и комбинированных процедур, при которых пациент находится в состоянии покоя а также при применении лечения с помощью гидромассажных систем (с возможностью аэрации), аэромассажа (жемчужный массаж) или подводного ручного массажа (с аэрацией). Управление процедурами обеспечивается с помощью простого надежного пневматического или электронного управления. Ванны можно оснастить озонатором, лампой для цветовой терапии, ароматерапией, и т.д.. Кроме предлагаемых стандартных моделей AQUADELICIA I - VIII, при изготовлении ванн можно учесть и специфические требования заказчика.




	Aquadelicia I	Aquadelicia I A	Aquadelicia II	Aquadelicia III	Aquadelicia IV	Aquadelicia V
Гидромассажные микро и мидифорсунки					22+10	22+10
Промыв гидромассажной системы /механический/					+	+
Аэрация гидромассажа					•	•
Ручная массажная форсунка (с аэрацией)			•	•	•	•
Съёмный шланг ручной массажной форсунки без аэрации			+	+	+	+
Количество гидромассажных зон					3	3
"TURBO" режим гидромассажа					+	+
Континуальный режим гидромассажа					•	•
Электронная регулировка интенсивности гидромассажа						
Пульсационный режим гидромассажа						
Колблюющийся (синусоидальный) режим гидромассажа						
Постепенная зонавая массаж (в пульсационном режиме)						
Аэромассажные форсунки / отверстия		12/204	+(12/204)	24/408	+(12/204)	24/408
Аэромассажные форсунки из нержавеющей стали		+	+	+	+	+
Зоны аэромассажа		1	+1	4	+1	4
Механическая регулировка мощности аэромассажа		•	+	•	+	•
Континуальный режим аэромассажа		•	+	•	+	•
Автоматическая сушка аэромассажной системы						
Мейджик - (14 пластиковых форсунок с 238 массажными отверстиями)		+	+		+	
Электронный индикатор температуры						
Аналоговый индикатор температуры	•	•	•	•	•	•
Жестко настроенное время процедуры						
Встроенная пленочная клавиатура						
Смесительный клапан	•	•	•	•	•	•
Автоматическое заполнение		+	+	+	+	+
Двухпозиционная опора ног	+	+	+	+	+	+
Ступень 2-ух ступенчатый	•	•	•	•	•	•
Ступень 2-ух ступенчатый с поручнями	+	+	+	+	+	+
Душ для мытья ванны (горячая и холодная вода)	•	•	•	•	•	•
Привод минеральной, насыщенной воды	•	•	+	+	+	+
Присоединение внешнего источника сжатого воздуха	+		+		+	
Цвет ванны зелёный, бирюзовый	+	+	+	+	+	+
Возможность выбора цвета боковых панелей	+	+	+	+	+	+
Встроенная программа процедур						
Колортерапия точечная S30		+	+	+	+	+
Колортерапия рефлектор D90		+	+	+	+	+
Ароматерапия					+	+
Озонатор		+		+	+	+
Таблеточная дезинфекция (только с системой промыва)					+	+
Подсветка панелей (тёплая белая)		+	+	+	+	+
Напряжение		230V / 50Hz / 1~	230V / 50Hz / 1~	230V / 50Hz / 1~	400V / 50Hz / 3~	400V / 50Hz / 3~
Мощность (стандартное оснащение)		0,4 kW / 3,1 A	1,5 kW / 7,2 A	2,3 kW / 13,4 A	3,6 kW / 16,8 A	4,0 kW / 23,9 A
Полезный объём (л)	350	350	350	350	350	350
Максимальный объём (л)	460	460	460	460	460	460
Размеры (д x ш x в) мм	2465 x 990 x (1030-1050)	2465 x 990 x (1030-1050)	2465 x 990 x (1030-1050)	2465 x 990 x (1030-1050)	2465 x 990 x (1030-1050)	2465 x 990 x (1030-1050)
Вес (кг)	133	159	167	195	202	234
Время наполнения ванны (мин.)	6	6	6	6	6	6
Время опорожнения (мин.)	5	5	5	5	5	5
Давление воды в ручной массажной форсунке			0,05 - 0,4 MPa	0,05 - 0,4 MPa	0,05 - 0,4 MPa	0,05 - 0,4 MPa
• Стандартное оснащение						
+ Дополнительное оснащение						

	Aquadelicia VI	Aquadelicia VII	Aquadelicia VII LFK	Aquadelicia VIII	Aquadelicia VIII LFK	Aquadelicia VIII PLFK
Гидромассажные микро и мидифорсунки		22+10	22+10	22+10	22+10	22+10
Промыв гидромассажной системы (механический)		+	+	+	+	+
Аэрация гидромассажной системы		•	•	•	•	•
Ручная массажная форсунка подводная с аэрацией	•	•	•	•	•	•
Съёмный шланг ручной массажной форсунки без аэрации	+	+	+	+	+	+
Количество гидромассажных зон		3	3	3	3	6
"TURBO" режим гидромассажа		+	+	+	•	•
Континуальный режим гидромассажа		•	•	•	•	•
Электронная регулировка интенсивности гидромассажа		+	+	+	+	
Пульсационный режим гидромассажа		•	•	•	•	•
Колблюющийся (синусоидальный) режим гидромассажа		+	+	+	+	
Постепенная зонавая массаж (в пульсационном режиме)		•	•	•	•	•
Аэромассажные форсунки / отверстия	24/408	+(12/204)	+(12/204)	24/408	24/408	24/408
Аэромассажные форсунки из нержавеющей стали	+	+	+	+	+	+
Зоны аэромассажа	4	+1	+1	4	4	4
Механическая регулировка мощности аэромассажа	•	+	+	•	•	•
Континуальный режим аэромассажа	•	+	+	•	•	•
Автоматическая сушка аэромассажной системы	•	+	+	•	•	•
Мейджик - 14 пластиковых форсунок с 238 массажными отверстиями		+	+			
Электронный двухфункциональный индикатор температуры	•	•	•	•	•	•
Аналоговый индикатор температуры						
Время процедуры	• 20 /+(1-20 min.)	• 20 /+(1-20min.)	• (1-30min.)	• 20 /+(1-20min.)	• (1-30min.)	• (1-30min.)
Встроенная пленочная клавиатура			•		•	•
Смесительный клапан	•	•	•	•	•	•
Автоматическое заполнение	+	+	+	+	+	•
Двухпозиционная опора ног	+	+	+	+	+	+
Ступень 2-ух ступенчатый	•	•	•	•	•	•
Ступень 2-ух ступенчатый с поручнями	+	+	+	+	+	+
Душ для мытья ванны (горячая и холодная вода)	•	•	•	•	•	•
Привод минеральной, насыщенной воды	+	+	+	+	+	+
Присоединение внешнего источника сжатого воздуха		+	+			
Цвет ванны зелёный, бирюзовый	+	+	+	+	+	+
Возможность выбора цвета боковых панелей ванны	+	+	+	+	+	+
Встроенная программа процедур			+ 5		+ 5	+ 15
Колортерапия точечная S30	+	+	+	+	+	+
Колортерапия рефлектор D90	+	+	+	+	+	+
Ароматерапия		+	+	+	+	+
Озонатор	+	+	+	+	+	+
Таблеточная дезинфекция (только с системой промыва)		+	+	+	+	+
Подсветка панелей (тёплая белая)	+	+	+	+	+	+
Напряжение	230V / 50Hz / 1~	400V / 50Hz / 3~	400V / 50Hz / 3~	400V / 50Hz / 3~	400V / 50Hz / 3~	400V / 50Hz / 3~
Мощность (стандартное оснащение, включение всех систем)	2,3kW / 13,4A	3,6kW / 16,8A	3,6kW / 16,8A	5,2kW / 26,9A	5,2kW / 26,9A	5,2kW / 26,9A
Полезный объём (л)	350	350	350	350	350	350
Максимальный объём (л)	460	460	460	460	460	460
Размеры (д x ш x в) мм	2465 x 990 x (1030-1050)	2465 x 990 x (1030-1050)	2465 x 990 x (1030-1050)	2465 x 990 x (1030-1050)	2465 x 990 x (1030-1050)	2465 x 990 x (1030-1050)
Вес (кг)	196	210	210	239	239	239
Время наполнения (мин.)	6	6	6	6	6	6
Время опорожнения (мин.)	5	5	5	5	5	5
Давление воды в ручной массажной форсунке	0,05 - 0,4 MPa	0,05 - 0,4 MPa	0,05 - 0,4 MPa	0,05 - 0,4 MPa	0,05 - 0,4 MPa	0,05 - 0,4 MPa
• Стандартное оснащение						
+ Дополнительное оснащение						

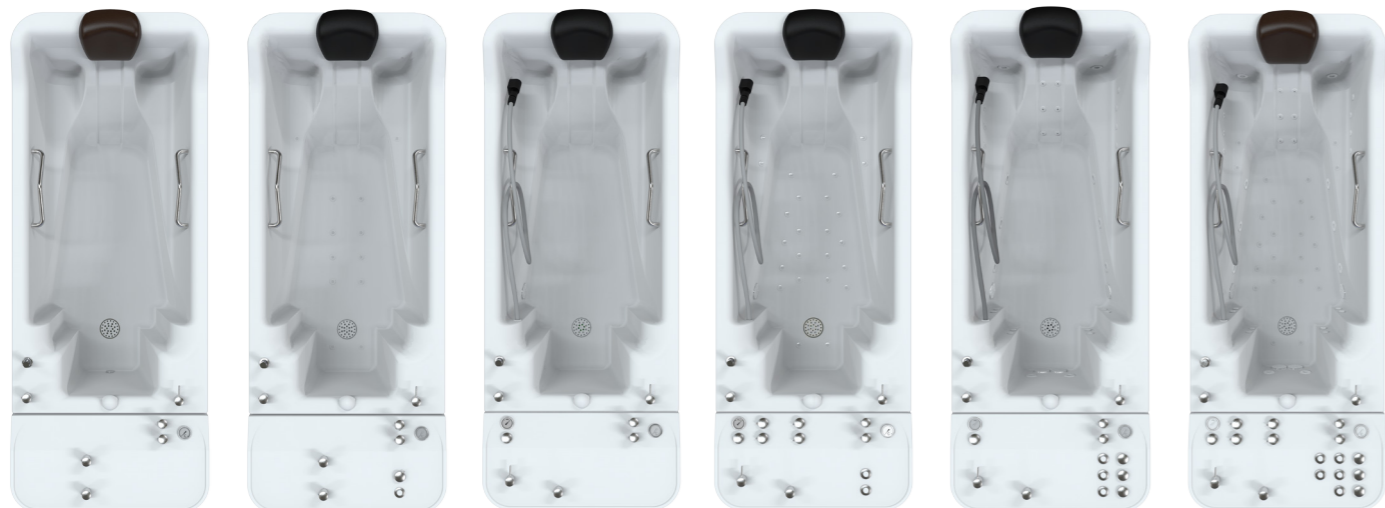

AQUADELICIA IX

Ванны типа AQUADELICIA IX представляют собой современный элемент СПА центра и предлагают широкую шкалу интересных, комфортных, приятных, расслабляющих и успокоительных процедур. Они предоставляют услуги и программы, которые помогают поддерживать здоровье, предотвращать заболевания и улучшать хронические проявления, которые непременно сопровождают процесс старения.

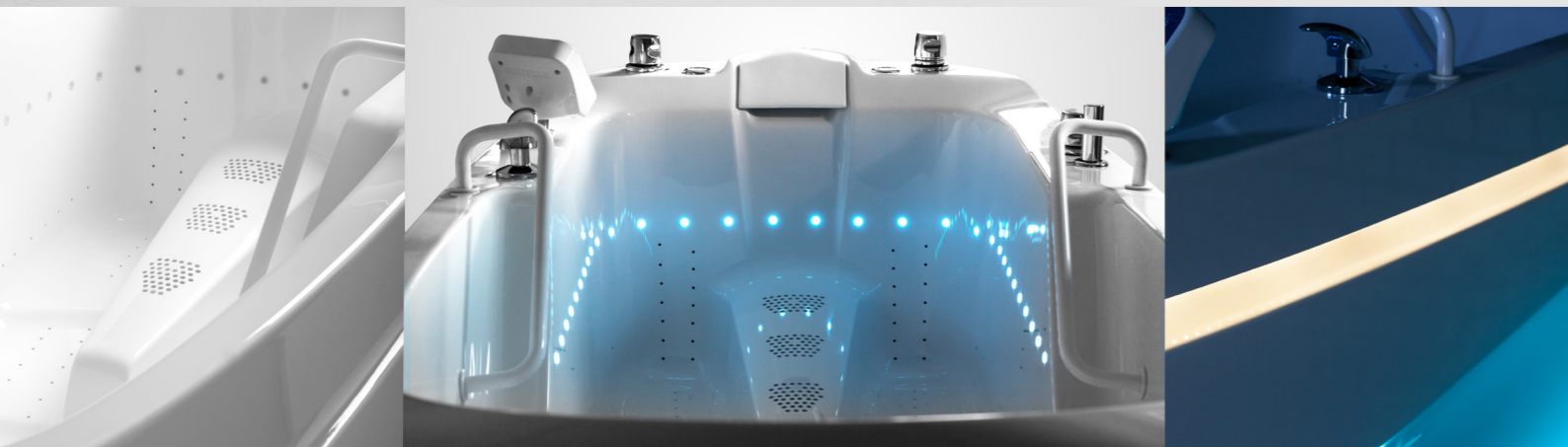


	Aquadelicia IX E	Aquadelicia IX	Aquadelicia IX.X
Гидромассажные микро и мидифорсунки	30+4		292 drilled jets
Гидромассажные микро и миди форсунки из нержавеющей стали	+ (30+4)	40 +10	
Промыв гидромассажной системы (механический)	+	+	+ (электронный)
Аэрация гидромассажа	•	•	•
Ручная массажная форсунка без аэрации	+ (только для ванн без системы Magic или без форсунки Turbo Jet)	+ (только для ванн без системы Magic или без форсунки Turbo Jet)	+
Аналоговый индикатор давления в ручной форсунке	+	+	+
Электронная регулировка интенсивности гидромассажа		+	
Зоны гидромассажа	1	2/+ 1	10
Континуальный режим гидромассажа	•	•	•
Пульсационный режим гидромассажа	•	•	
Колесблюющийся (синусоидальный) режим гидромассажа		+	
Постепенная зонавая массаж (в пульсационном режиме)		•	•
Turbo Jet форсунка	+ (только для ванн без системы Magic или без ручной массажной форсунки)	+ (только для ванн без системы Magic или без ручной массажной форсунки)	
Аэромассажные форсунки / отверстия	12/204	12/204	
Мейджик - 14 пластиковых форсунок с 238 отверстиями	+ (только для ванн без ручной массажной форсунки или без форсунки Turbo Jet)	+ (только для ванн без ручной массажной форсунки или форсунки Turbo Jet)	
Аэромассажные форсунки из нержавеющей стали	+12/204	12/204	
Силент аэромассаж (форсунки из нержавеющей стали)	+10/50	+10/50	
Механическая регулировка мощности аэромассажа	•	•	
Автоматическая сушка аэромассажной системы	•	•	
Двухфункциональный цифровой индикатор температуры	•	•	•
Время процедуры	• 20 / +(1-30 min.)	• (1-30 min.)	• (1-30 min.)
Вертикальная плёночная клавиатура на стойке	+	•	•
Управляющие кнопки в доступности пользователя	+	+	
Термостат /только с автоматическим напуском/	+	+	•
Смесительный клапан наполнения ванны	•	•	
Автоматическое заполнение	+	+	•
Двухпозиционная опора ног	+	+	+
Ступеньки 2-ух ступенчатые с поручнями	+	+	+
Позиционируемые по высоте ножки ванны	4	4	4
Душ для мытья ванны (горячая и холодная вода)	•	•	•
Привод минеральной, насыщенной воды	+	+	+
Возможность выбора цвета боковых панелей ванны	+	+	+
Встроенные программы процедур		+ 5	15
Колортерапия точечная S30	+	+	+
Колортерапия рефлектор D90	+	+	+
Ароматерапия	+	+	
Озонатор	+	+	+
Таблеточная дезинфекция (только ванны с промывом)	+	+	+
Поддержание температуры воды	+	+	+
Подсветка панелей (тёплая белая)	+	+	+
Электромагнитный смягчитель воды	+	+	+
Напряжение	230V / 50Hz / 1~	230V / 50Hz / 1~ (400V / 50Hz / 3~)	230V / 50Hz / 1~
Мощность	1,9 kW / 9,7 A	1,9 kW / 9,7 A (2,6 kW / 15 A)	1,8kW / 9,1A (2,6kW / 15A)
Полезный объём (л)	305	305	305
Максимальный объём (л)	385	385	385
Размеры (д х ш х в) mm	2155x980x975-995	2155x980x975-995	2155x980x975-995
Вес (кг)	212	212	200
Время наполнения максимального объёма ванны	5 min.	5 min.	5min.
Время опорожнения максимального объёма ванны	4 min.	4 min.	4 min.
Давление воды в ручной массажной форсунке	0,05 - 0,4 MPa ± 10%	0,05 - 0,4 MPa ± 10%	0,05 - 0,4 MPa ± 10%
• Стандартное оснащение			
+ Дополнительное оснащение			



AQUADELICIA mini

Ванны AQUADELICIA MINI предназначены для применения в курортах, санаториях, оздоровительных учреждениях, в реабилитационных кабинетах (главным образом детских), социальных учреждениях а также в целях велнес или спортивной реабилитации и отдыха. В них можно проводить бальнеологические процедуры для всего тела в состоянии покоя а также лечебную и восстанавливающую терапию с использованием систем гидромассажа (с возможностью аэрации) или аэромассажа. В ваннах AQUADELICIA mini можно использовать минеральные воды (углекислые, сероводородные, хлорированные, радоновые, серные, азотистые и т.д.), йодисто-бромистую воду или морскую воду а также воду обогащенную лекарственными или ароматическими препаратами. Управление массажными системами можно выбрать простое пневматическое или электронное, которое предоставляет большое разнообразие массажных функций. Кроме предложения стандартных моделей, при производстве ванн можно учесть и специфические требования заказчиков.

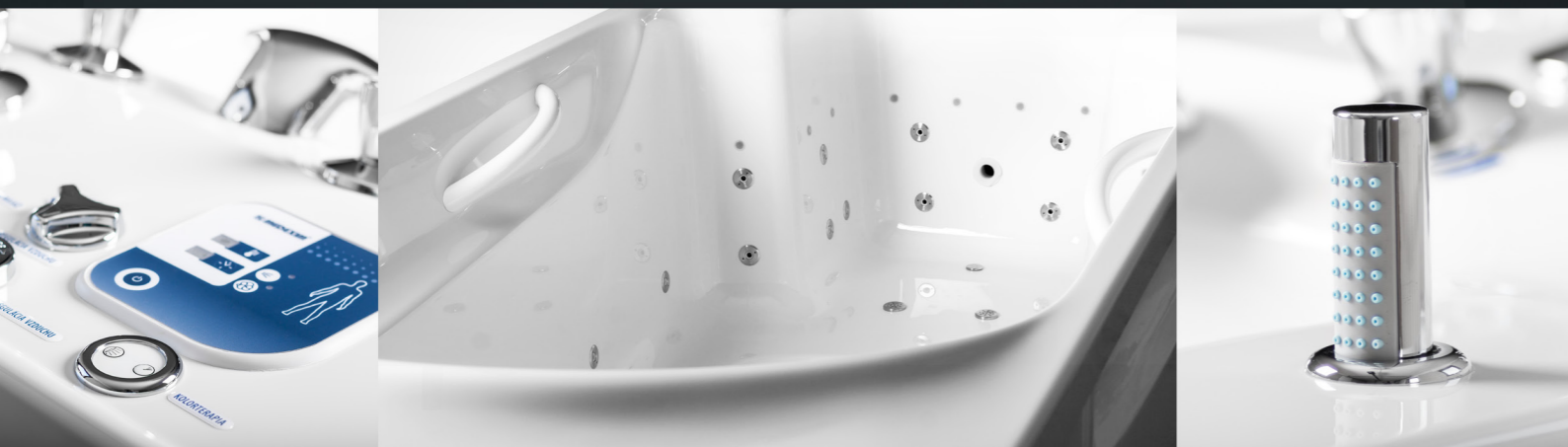

	Aquadelicia Mini	Aquadelicia Mini I	Aquadelicia Mini I L	Aquadelicia Mini II	Aquadelicia Mini III	Aquadelicia Mini III L
Гидромассажные микрофорсунки		30	30		30	30
2 гидромассажные зоны			+(4 миди+26 микро)			+(4 миди+26 микро)
Промыв гидромассажной системы (механический / электронный)		+	+		+	+
Аэрация гидромассажа		•	•		•	•
Мейджик - 14 форсунок с 238 отверстиями				+	+	+
Континуальный режим гидромассажа		•	•		•	•
Электронная регулировка интенсивности массажа			+			+(BABY)
Пульсационный режим гидромассажа			•			•
Колблюющийся (синусоидальный) режим гидромассажа			+			+
Съемный массажный шланг без аэрации		+	+	+	+	+
"TURBO" режим гидромассажа					+	+
Аэромассажные форсунки / отверстия				10 / 170	10 / 170	10 / 170
Сверленные воздушные форсунки				+ 70	+ 70	+ 70
Механическая регулировка аэромассажа				•	•	•
Континуальный режим аэромассажа				•	•	•
Присоединение источника сжатого воздуха	+	+	+			
Двухфункциональный цифровой термометр		+	•	+	+	•
Аналоговый индикатор температуры	•	•		•	•	
Встроенная / на стойке пленочная клавиатура			+	+		+
Смесительный клапан	•	•		•	•	•
Время процедуры			• 20 min. / +(1-20 min.),(1-30 min.)	+(1-20 min.)		• 20 min. / +(1-20 min.),(1-30 min.)
Автоматическое заполнение ванны		+	+	+	+	+
Степень одноступенчатый	+	+	+	+	+	(+) BABY
Двухпозиционная опора ног	+	+	+	+	+	+
Позиционируемые по высоте ножки	6	6	6	6	6	6
Душ для мытья ванны (горячая и холодная вода)	•	•	•	•	•	•
Привод минеральной, насыщенной воды	•	+	+	+	+	+
Цвет ванны зелёный, бирюзовый	+	+	+	+	+	+
Возможность выбора цвета боковых панелей	+	+	+	+	+	+
Корыто ванны в дизайне Aquadelicia IX	+	+	+	+	+	+
Колортерапия точечная S10		+	+	+	+	+
Колортерапия точечная S30		+	+	+	+	+
Колортерапия рефлектор D90		+	+	+	+	+
Подсветка панелей (тёплая белая)		+	+	+	+	+
Озонатор		+	+	+	+	+
5 встроенных программ / 2 гидромассажные зоны / Таблеточная дезинфекция (только с промывом гидромассажной системы)		+	+			+
Ароматерапия		+	+		+	+
Поддержание температуры воды в ванне		+	+		+	+
Напряжение		230V / 50Hz / 1~	230V / 50Hz / 1~	230V / 50Hz / 1~	230V / 50Hz / 1~	230V / 50Hz / 1~
Мощность		1,1kW / 5,0A	1,1kW / 5,0A	0,4kW / 3,1 A	1,5kW / 8,1 A	1,5kW / 8,1 A
Полезный объём в л	200	200	200	200	200	200
Максимальный объём в л	270	270	270	270	270	270
Время наполнения ванны	4 (мин.)	4 (мин.)	4 (мин.)	4 (мин.)	4 (мин.)	4 (мин.)
Время опорожнения максимального объёма	3 (мин.)	3 (мин.)	3 (мин.)	3 (мин.)	3 (мин.)	3 (мин.)
Размеры (д x ш x в) в мм	2185 x 800 x 885-905	2185 x 800 x 885-905	2185 x 800 x 885-905	2185 x 800 x 885-905	2185 x 800 x 885-905	2185 x 800 x 885-905
Вес (кг)	119	125	138	127	139	147
• Стандартное оснащение						
+ Дополнительное оснащение						




AQUAMANUS

предназначен для лечебного вихревого массажа верхних конечностей с помощью гидромассажных форсунок находящихся на боковых стенках ванны в эргономически активных местах. Гидромассажное воздействие потока воды можно сделать более эффективным благодаря аэрации. Вихревая ванна Aquamanus применяется для снятия общего напряжения и нагрузки на суставы, блокады мышц, сужения сосудов и рассасывания воспаленных мест а также для восстановительной реабилитации верхних конечностей после чрезмерной физической нагрузки.



	Aquamanus (P)	Aquamanus
Гидромассажные мидифорсунки (настройка направления струи воды)	2	2
Гидромассажные микрофорсунки (настройка направления струи воды)	10	10
Гидромассажные форсунки из нержавеющей стали	+	+
Максимальный расход насоса (л/мин.)	283	283
Механический промыв гидромассажной системы	+	+
Электронный промыв гидромассажной системы		+
Аэрация гидромассажа	•	•
Электронная регулировка интенсивности гидромассажа в континуальном режиме		•
Континуальный режим гидромассажа	•	•
Пульсационный режим гидромассажа		•
Колеблющийся (синусоидальный) режим гидромассажа		•
Защита насосов от запуска без воды	•	•
Двухфункциональный электронный индикатор температуры		•
Термостатический смеситель напуска воды	+	+
Смесительный клапан	•	•
Позиционируемые по высоте ножки	4	4
Душ для мытья ванны (горячая и холодная вода)	•	•
Цвет ванны белый	•	•
Цвет ванны: зелёный, бирюзовый	+	+
Цвет панелей белый	•	•
Возможность выбора цвета боковых панелей ванны с 720 цветов	+	+
Электронный таймер (1-20 мин.)		+
Электронный таймер (1-30 мин.)		+
Встроенная пленочная клавиатура		+
Пленочная клавиатура на вертикальной стойке		+
Ручки кранов из нержавеющей стали	•	•
Привод минеральной, насыщенной воды	+	+
Колортерапия точечная S10	+	+
Включение тревоги	+	+
Напряжение	230 V / 50 Hz / 1~	230 V / 50 Hz / 1~
Мощность (стандартное оснащение, включение всех систем)	0,70 kW / 3,2 A	0,70 kW / 3,2 A
Полезный объём в л	25	25
Максимальный объём в л	30	30
Размеры (ш x д x в) в мм	1010 x 695 x 1010-1030	1010 x 695 x 1010-1030
Вес (кг)	74	74
Сток ванна / пол диаметр в мм	50 / 100	50 / 100
Подача холодной и горячей воды	3/4"	3/4"
Время наполнения (мин.)	3	3
Время опорожнения максимального объёма ванны (мин.)	2,5	2,5
Максимальная допустимая температура напускаемой горячей (минеральной) воды	60°C	60°C
• Стандартное оснащение		
+ Дополнительное оснащение		

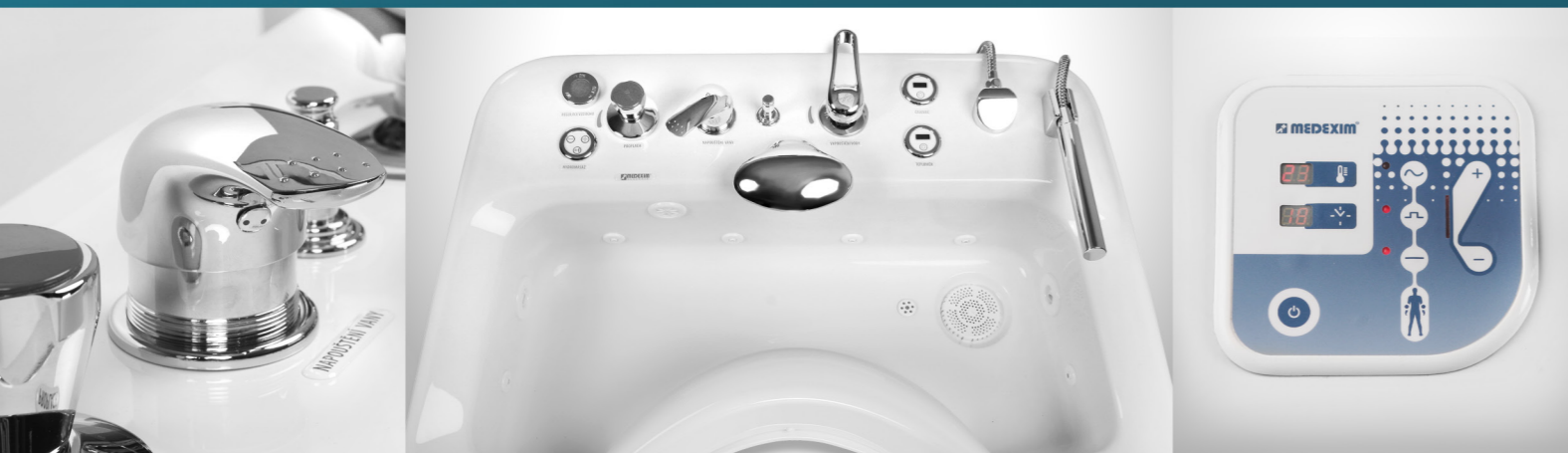

AQUAPEDIS & AQUAPEDIS I.

Модели ванн AQUAPEDIS и AQUAPEDIS I предназначены для проведения сидячих вихревых процедур для нижних конечностей с возможностью массажа в области голени, колена, бедра, седалищной и бедренной зоны.



	Aquapedis (P)	Aquapedis	Aquapedis I	Aquapedis I L
Гидромассажные микро / миди форсунки	16+0	16+0	15+14	15+14
Промыв гидромассажной системы механический	+	+	+	+
Промыв гидромассажной системы электронный		+	+	+
Мануальное управление мощности аэрации гидромассажа	•	•	•	•
Независимое управление зонами гидромассажа			•	•
Электронная регулировка интенсивности гидромассажа (только в континуальном режиме)		+		+
Континуальный режим гидромассажа	•	•	•	•
Пульсационный режим гидромассажа		•		•
Колеблющийся (синусоидальный) режим гидромассажа		+		+
Зоны гидромассажа	1	1	2	2
Гидромассажная форсунка для массажа гемороида			•	•
Аэромассажные форсунки /отверстия/		+(4/68)	+(4/68)	+(4/68)
Аэромассажные форсунки из нержавеющей стали		+(4/68)	+(4/68)	+(4/68)
Аэромассажные форсунки из нержавеющей стали		+(4/20)	+(4/20)	+(4/20)
Электронная регулировка мощности аэромассажа		+		+
Континуальный режим аэромассажа		+	+	+
Пульсационный режим аэромассажа		+		+
Колеблющийся (синусоидальный) режим аэромассажа		+		+
Зоны аэромассажа		1	1	1
Двухфункциональный цифровой индикатор температуры		•	+	•
Аналоговый индикатор температуры	•		•	
Время процедуры		• 20 / +(1-20 min., 1-30 min.)		• 20 / +(1-20 min., 1-30 min.)
Встроенная пленочная клавиатура		+		
Пленочная клавиатура на вертикальной стойке		+		+
Смесительный клапан	•	•	•	•
Автоматическое заполнение		+		+
Автоматическое двухуровневое напускание			+	+
Ступеньки 2-ух ступенчатые			•	•
Ступеньки 2-ух ступенчатые с поручнями			+	+
Позиционируемые по высоте ножки ванны	4	4	4	4
Душ для мытья ванны (горячая и холодная вода)	•	•	•	•
Привод минеральной, насыщенной воды	+	+	+	+
Цвет ванны: зелёный, бирюзовый	+	+		
Возможность выбора цвета боковых панелей ванны с 720 цветов	+	+	+	+
Колортерапия точечная S10	+	+	+	+
Подсветка панелей (тёплая белая)			+	+
Озонатор		+	+	+
Таблеточная дезинфекция (только с системой промыва)	+	+	+	+
Термостатический смеситель	+	+	+	+
Включение тревоги	+	+	+	+
Напряжение	230V / 50Hz / 1~	230V / 50Hz / 1~	230V / 50Hz / 1~	230V / 50Hz / 1~
Мощность (стандартное оснащение, включение всех систем)	0,70 kW / 3,2 A	0,70 kW / 3,2 A	1,4 kW / 6,4 A	1,4 kW / 6,4 A
Полезный объём в л	46	46	167	167
Максимальный объём в л	65	65	184	184
Размеры (д x ш x в) мм	920 x 940 x 670-690	920 x 940 x 670-690	1550 x 770 x 960-980	1550 x 770 x 960-980
Вес (кг)	68	68	100	120
Время наполнения ванны	3 (мин.)	3 (мин.)	3 (мин.)	3 (мин.)
Время опораживания максимального объёма ванны	2,5 (мин.)	2,5 (мин.)	2,5 (мин.)	2,5 (мин.)
• Стандартное оснащение				
+ Дополнительное оснащение				



AQUAPEDIS II.

Гальваническая 4-камерная ванна для ног и рук предназначена для принятия электротерапии с помощью разных видов токов в водной среде. Управляемый электрический ток применяется для верхних и нижних конечностей включая перекрестного применения между конечностями. Гальваническая ванна AQUAPEDIS II предлагает лечение с помощью Трабертова анальгетического и Трабертова спазмолитического тока с исключительным эффектом и помощью в области обезболивания.



Aquapedis II galvanic

Виды электрических токов	G - Гальванический, ТА - Ток Траберта анальгетический, TS - Ток Траберта спазмолитический, Гальванический коммутированный, S - 4 x Синус S (включая 1 коммутированного), Т - 4 x Треугольный (включая 1 коммутированного), А - 4 x Пилообразный ток (включая 1 коммутированного), F - 4 x ток Фарадея (включая 1 коммутированного), М - модулированный 0,5 Hz, модулированный 0,5 Hz коммутированный, модулированный 2 Hz, модулированный 2 Hz коммутированный
Сверленные аэромассажные форсунки ванночек для рук	+ (2x12)
Источник воздуха в аэромассажные форсунки	+ 1
Механическая регулировка мощности аэромассажа	+
Электронная регулировка мощности аэромассажа	+
Континуальный режим аэромассажа	+
Пульсационный режим аэромассажа	+
Зоны аэромассажа	+ 4
Автоматическая сушка аэромассажной системы	+
Двухфункциональный цифровой индикатор температуры	•
Цифровой таймер (1-30 мин.)	•
Пленочная клавиатура на вертикальной стойке	•
Термостатический смеситель напускания воды	•
Кран горячей и холодной воды	•
Защита против переливу воды	•
Позиционируемые по высоте ножки ванны	4
Душ для мытья ванны с СТОП клапаном (горячая и холодная вода)	•
Цвет ванны белый	•
Возможность выбора цвета боковых панелей ванны с 720 цветов	+
Цвет панелей белый	•
Возможность выбора цвета боковых панелей ванны с 720 цветов	+
Электромагнитный смягчитель воды	+
Включение тревоги	+
Напряжение	230 V / 50 Hz / 1~
Размеры (д x ш x в) мм	1465x945x1020-1040
Стул с возможностью настройки по высоте	+
Полезный объём нижних ванночек (л)	2x20
Полезный объём верхней ванночки (л)	12
Общий полезный объём (л)	64
Максимальный объём нижних ванночек (л)	2x34
Максимальный объём верхней ванны (л)	17
Максимальный общий объём ванны (л)	102
Вес (кг)	78
Сток ванна / пол (мм)	50 / 100
Подача холодной и горячей воды	•
Время наполнения ваны (мин.)	3
Время опорожнения максимального объёма ванны (мин.)	2,5
Максимальная допустимая температура напускаемой горячей (минеральной) воды	60°C
• Стандартное оснащение	
+ Дополнительное оснащение	



AQUAPEDIS II.

Многофункциональная 4-камерная ванна для верхних и нижних конечностей, предназначенная для грязелечения или гидротерапевтического зонального массажа с использованием аэромассажных и гидромассажных форсунок. Независимое ручное управление интенсивностью воздушного массажа в ваннах для рук и ног позволяет лечить все конечности одновременно, или отдельно только верхние или нижние конечности.



	Aquapedis II MUD	Aquapedis II A	Aquapedis II AH
Гидромассажные форсунки			16
Промыв гидромассажной системы механический			+
Промыв гидромассажной системы электронный			+
Мануальное управление мощности подсоса воздуха			•
Электронная регулировка интенсивности гидромассажа			+
Континуальный режим гидромассажа			•
Пульсационный режим гидромассажа			•
Колеблющийся (синусоидальный) режим гидромассажа			+
Зоны гидромассажа			1
Аэромассажные форсунки/отверстия		4/68	4/68
Аэромассажные форсунки из нержавеющей стали		+(4/68)	+(4/68)
Сверленные аэромассажные форсунки в ванночках для рук		24/2x12	24/2x12
Количество источников сжатого воздуха		1	1
Электронная регулировка интенсивности аэромассажа		+	+
Континуальный режим аэромассажа		•	•
Колеблющийся (синусоидальный) режим аэромассажа		+	+
Зоны аэромассажа		3	3
Независимое управление верхнего и нижнего округа аэромассажа		•	•
Автоматическая сушка аэромассажной системы		•	•
Двухфункциональный цифровой индикатор температуры		•	•
Аналоговый индикатор температуры	•		
Электронный таймер (1-30 мин.)		•	•
Пленочная клавиатура на вертикальной стойке		•	•
Смесительный клапан	•	•	•
Клапан горячей и холодной воды	•	•	•
Позиционируемые по высоте ножки ванны	4	4	4
Душ с СТОП клапаном для минеральной воды	•	+	+
Душ для мытья ванны с СТОП клапаном (горячая и холодная вода)	•	•	•
Привод минеральной, насыщенной воды	•	+	+
Возможность выбора цвета ванны с 720 цветов	+	+	+
Возможность выбора цвета панелей ванны с 720 цветов	+	+	+
Электромагнитный смягчитель воды		+	+
Включение тревоги		+	+
Напряжение		230 V / 50 Hz / 1~	230 V / 50 Hz / 1~
Мощность		0,4 kW / 1 A	1,1 kW / 5 A
Размеры (д х ш х в) мм	1020x1310x965-985	960x1310x965-985	960x1310x965-985
Стул с возможностью настройки по высоте	+	+	+
Полезный объем нижней ванночки (л)	46	46	46
Полезный объем верхней ванночки (л)	12	12	12
Общий полезный объем (л)	70	70	70
Максимальный объем нижней ванны (л)	74	74	74
Максимальный объем верхней ванны (л)	17	17	17
Максимальный общий объем ванны (л)	108	108	108
Вес (кг)	75	96	96
Диаметр слива ванна/пол в мм	50 / 100	50 / 100	50 / 100
Подача холодной и горячей воды	3/4"	3/4"	3/4"
Время наполнения ванны	2,3 (мин.)	2,3 (мин.)	2,3 (мин.)
Время опорожнения максимального объема ванны	2 (мин.)	2 (мин.)	2 (мин.)
• Стандартное оснащение			
+ Дополнительное оснащение			



AQUABELA

Этим коммерческим наименованием обозначается душ Шарко, который применяется для стимуляции организма регулируемыми потоками горячей и холодной воды. Эргономические ручные массажные форсунки(пистолеты) предназначены для создания потока воды в точечном или веерном виде, который можно поворачивать на 90°. Регулировку и стабильное значение выбранных температур обеспечивают автоматические термосмесители - термоклапаны. Душ можно оснастить клапаном, который позволяет на левой форсунке мгновенно переключиться с горячей воды на холодную, и применять таким образом метод Кнайппа. В модели AQUABELA M, кроме этого, находятся клапаны для управления дополнительным оборудованием таким, как восходящий или циркулярный души. Все модели оснащены манометрами и термометрами для контроля давления воды и температуры воды в массажных форсунках. Душ Шарко можно изготовить в широкой цветовой гамме по желанию заказчика.



	Aquabela	Aquabela M
Термостатический смеситель 3/4" (шт.)	2	2
Клапан регулировочный 3/4" (шт.)	2	4
Массажная форсунка (шт.)	2	2
Аналоговый индикатор температуры (шт.)	2	2
Аналоговый индикатор давления (шт)	2	2
Позиционируемые по высоте ножки	4	4
Цвет пульта управления - белый	•	•
Возможность выбора цвета пульта управления с 720 цветов	+	+
Возможность выбора цвета панелей ванны с 720 цветов	+	+
Наклон веерообразной струи воды (0-90°)	•	•
Система по Кнайппу в левую массажную форсунку	+	+
Арретация массажных форсунок	•	•
Управление циркулярного и восходящего душа		•
Размеры (д x ш x в) мм	890 x 530 x 1180-1200	890 x 530 x 1180-1200
Подача холодной и горячей воды	4 x 3/4"	4 x 3/4"
Расход воды (одна форсунка)	0-48 l / min	0-48 l / min
Диаметр сливного трубопровода в поле (мм)	100	100
Минимальное необходимое давление (МПа)	0,35-0,5	0,35-0,5
Максимальная температуре	60°C	60°C
• Стандартное оснащение		
+ Дополнительное оснащение		



АКСЕССУАРЫ



MEDEXIM spol. s r.o.

Hlboká 58, 921 01 Piešťany, Slovakia
tel.: +421 33 7724035, 7724687
e-mail: medexim@medexim.sk
www.medexim.sk

